

NOTE: Sleep Noodle helps you to develop the habit of sleeping on your side. We recommend that you give the Sleep Noodle a try for a minimum of 2 weeks.

REMARQUE: Sleep Noodle vous aide à développer l'habitude de dormir sur le côté. Nous vous recommandons d'essayer Sleep Noodle pendant au moins deux semaines.

NOTA: Sleep Noodle te ayuda a desarrollar el hábito de dormir de lado. Le recomendamos que pruebe Sleep Noodle durante un mínimo de 2 semanas.

Sleep Noodle®

Stop Snoring. I've got your back.™
Arrêter de ronfler. Je te couvre.™
¡Dejar de roncar. Tengo su espalda.™

Sleep Noodle®

www.sleepnoodle.com

Manufactured by KEGO Corporation
USA: Louisville, KY, 40241 Tel: 800.600.1390
Canada: London, ON, N6N 0A3 Tel: 866.862.7328

Instruction Manual
Manuel d'instructions
Manual de instrucciones

Sleep Noodle® Instruction Manual / Manuel d'instructions / Manual de instrucciones

EN

Thank you for purchasing the Sleep Noodle. This is the first step in enjoying a good night's sleep, for both you and your sleep partner.


Follow the directions below to ensure you receive the most benefits from this innovative device.

Instructions:

1. You have already chosen your size by following the measuring instructions listed on our website before you purchased it. Confirm that you have chosen the correct size by measuring the distance around your chest, just below the underarm. Compare your measurement to the sizing chart on our packaging.
2. Wrap the belt around your body around chest level, just below the underarm. If correctly positioned, the black pouch with noodle should be located on back, and the belt on the front. Do not tighten the Sleep Noodle belt to the point that you are uncomfortable. It should be loose enough to place two fingers between your chest and belt, while not allowing the belt to rotate around your chest. The inside of the belt is made of a non-slip material to help avoid this rotation. If the belt has been fitted correctly, both the white Sleep Noodle logo on the front, and the Sleep Noodle logo on the back should be right side up.
3. After use, remove the Sleep Noodle by pulling the belts apart. Reattach the two sides of the belt together when not in use; this will reduce the amount of external debris such as hair, lint, and dirt from attaching to the hook & loop fastener, which could compromise its fastening strength.

Cleaning:

1. Always remove the internal foam noodle before washing the Sleep Noodle. This is done by unzipping the pouch, and pulling the noodle outwards, past the zipper. The Sleep Noodle includes a self-healing zipper. If the zipper separates, simply zip and re-zip to repair. You may be required to bend the foam slightly to pass the zippered area. Never force the zipper open or closed. Always store foam noodle in a clean dry area while cleaning belt. Hand wash with mild detergent in cool water. Do not soak and do not use bleach. Hang to dry.

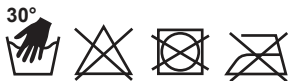

Warranty:

The Sleep Noodle includes a 1 year limited manufacturer warranty from time of purchase. In the case of a warranty issue, return the entire Sleep Noodle to the location of purchase with the original receipt. At the manufacturer's option, the belt will be replaced or repaired.

FR

Nous vous remercions d'avoir acheté le Sleep Noodle. Vous venez de franchir la première étape afin d'obtenir un sommeil de qualité optimale pour vous et votre partenaire de sommeil. Nous vous invitons à suivre les directives suivantes afin de profiter au maximum des avantages offerts par cet article conçu pour un sommeil de rêve.

Instructions :

1. Vous avez déjà choisi votre taille en suivant les instructions de mesure indiquées sur notre site Web avant de l'acheter. Confirmez que vous avez choisi la bonne taille en mesurant la distance autour de votre thorax, juste en dessous de l'aisselle. Comparez votre mesure au tableau des tailles sur notre emballage.
2. Placez la ceinture autour de votre thorax, juste sous les aisselles. Le sachet noir contenant le coussinet doit être situé vers l'arrière tandis que la ceinture doit se trouver à l'avant. Ne serrez pas trop la ceinture pour éviter tout inconfort. Vous deviez pouvoir insérer deux doigts entre votre thorax et la ceinture. Ajustée correctement, la ceinture ne sera pas portée à tourner autour de votre thorax. L'intérieur de la ceinture est composé d'un matériau antidérapant pour éviter toute rotation. Si la ceinture a été ajustée correctement, le logo Sleep Noodle blanc à l'avant et le logo Sleep Noodle à l'arrière doivent être à l'endroit.
3. Une fois que vous avez fini d'utiliser le Sleep Noodle, retirez-le en tirant simplement sur les attaches de la ceinture. Reliez de nouveau les deux côtés de la ceinture lorsque vous ne n'utilisez pas le coussinet. Cela empêche les rebuts comme les cheveux, les peluches et la saleté de s'agripper à la fermeture à boucles et crochets de réduire sa résistance.

Entretien :

1. Retirez toujours le coussinet en mousse à l'intérieur avant de laver le produit. Pour ce faire, ouvrez la fermeture à glissière puis tirez le coussinet vers l'extérieur. Le Sleep Noodle comprend une fermeture éclair auto réparatrice. Si la fermeture éclair se sépare, il suffit de tirer la fermeture éclair dans un sens puis dans le sens opposé pour la réparer. Vous pourriez devoir le courber légèrement afin de le retirer du sachet par l'ouverture à glissière. Ne forcez jamais la glissière pour l'ouvrir ou la fermer. Rangez toujours les nouilles en mousse dans un endroit propre et sec pendant le nettoyage de la courroie. Lavez à la main avec un détergent doux dans de l'eau froide. Ne pas tremper et ne pas utiliser d'eau de Javel. Suspendre pour sécher.

Garantie :

Le Sleep Noodle comprend une garantie limitée d'un (1) an à compter de la date d'achat. Pour toute demande liée à la garantie, retournez l'article au complet accompagné du reçu original là où vous l'avez acheté. La ceinture sera soit remplacée ou réparée au choix du fabricant.

ES

Gracias por comprar el Sleep Noodle. Este es el primer paso para disfrutar de una buena noche de sueño, tanto para usted como para su pareja de sueño. Siga las instrucciones a continuación para asegurarse de recibir todos los beneficios que ofrece este innovador dispositivo.

Instrucciones:

1. Ya ha elegido su talla siguiendo las instrucciones de medición que figuran en nuestro sitio web antes de comprarlo. Confirme que ha elegido el tamaño correcto midiendo la distancia alrededor de su pecho, justo debajo de la axila. Compare su medida con la tabla de tallas en nuestro empaque.
2. Envuelva la correa alrededor de su cuerpo cerca del nivel del pecho, justo por debajo de la axila. Si está correctamente colocado, la bolsa negra con la parte en espuma debe estar ubicada en la parte posterior y la correa en la parte delantera. No apriete la correa del Sleep Noodle hasta el punto de sentirse incómodo. Debe estar lo suficientemente floja como para colocar dos dedos entre su pecho y la correa, sin permitir que esta gire alrededor de su pecho. El interior de la correa está hecho de un material antideslizante para ayudar a evitar esta rotación. Si el cinturón se ha colocado correctamente, tanto el logotipo blanco de Sleep Noodle en la parte delantera como el logotipo de Sleep Noodle en la parte posterior deben estar boca arriba.
3. Después de usar, retire el Sleep Noodle separando la correa del sujetador de tela. Al unir las correas cuando no están en uso, reducirá la cantidad de residuos externos como pelo, pelusa y suciedad que se adhieren al cierre de gancho y lazo y reducen su fuerza de sujeción.

Limpieza:

1. Siempre retire el noodle de espuma interno antes de lavar el Sleep Noodle. Esto se hace abriendo la cremallera de la funda y sacando la parte de espuma hacia afuera, pasando la cremallera. Es posible que deba doblar la espuma ligeramente para pasar el área de la cremallera. Nunca fuerce la cremallera para abrir o cerrar. Guarde siempre los fideos de espuma en un área limpia y seca mientras limpia la banda. Lavar a mano con detergente suave en agua fría. No remoje y no use lejía. Colgar para secar.

Garantía:

El Sleep Noodle incluye una garantía limitada del fabricante de 1 año desde el momento de la compra. En el caso de un problema de garantía, devuelva todo el Sleep Noodle a la ubicación de compra con el recibo original. A opción del fabricante, la correa será reemplazada o reparada.

